

患者一覧 CSV の使い方

(4.0)


患者一覧 CSV では、**最終画像保存日を基準**として該当患者様を検索し、CSV 資料を作成します。**パソコンでログインして操作してください。**

本機能は、

- ・姿勢分析の実施期間が開いている患者様を探し、フォローするときに役立ちます。
- ・保存画像数の調整のために、画像削除対象者を選ぶときに役立ちます。



1.メイン画面**患者一覧 CSV** を押してください。

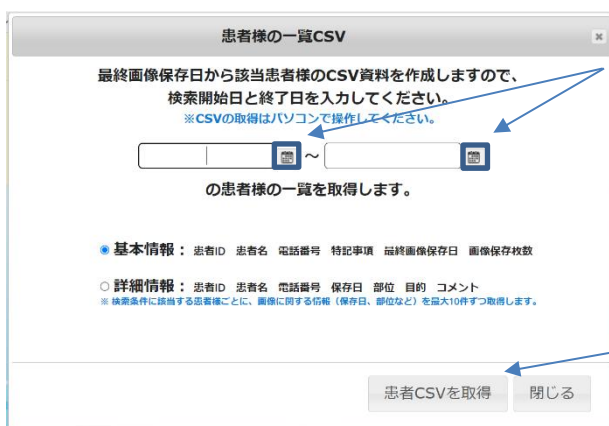

2.開始日と終了日をカレンダーで入力して下さい。

3.情報の種類を選択してください。

4.「**患者 CSV を取得**」を押すと、CSV ファイルが生成されます。

(検索例)

①2020年10月1日から2021年8月31日の間に最終保存日を迎えている方を検索

検索開始日 : 2020年10月1日

検索終了日 : 2021年8月31日

②2021年4月以降姿勢撮影をしていない方を検索

検索開始日：導入日以降の日付を入力

検索終了日：2021年4月30日

③3～4か月間、姿勢撮影が空いている方を検索

※検索実行日を2021年10月13日とする。

検索開始日：2021年6月12日

検索終了日：2021年7月12日

ご不明な点は CIM 事務局までお気軽にお問い合わせください。

【お問合せ】 CIM 株式会社 E.F.A.S 事務局 E-mail : support@efas.jp